


GC France - Offres Cabinet

Janvier - Juin 2026

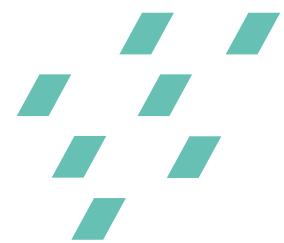

L'usure est bien réelle, nos solutions aussi

Les approches GC en restauration directe pour lutter contre l'usure dentaire

Par où commencer ?

Bien que son degré de gravité puisse varier, nous nous concentrerons ici sur l'usure modérée, dont les signes sont clairement visibles mais qui n'est pas encore étendue ni compromettante sur le plan structurel. Plus les soins sont retardés, plus le confort des patients diminue. Alors soyez réactif... et laissez GC vous guider !



Identifier

Comment reconnaître efficacement l'usure ?

L'usure est le plus souvent multifactorielle. Il existe quatre formes d'usure.



Erosion

Dr P. Swerts, Belgique



Abrasion

Dr A. Salehi, France



Attrition

Dr K. Karagiannopoulos, UK



Abfraction

Dr S. Moretto, Brésil

Lorsque l'usure devient pathologique, provoquant douleur, inconfort, problèmes fonctionnels ou une détérioration de l'aspect esthétique, elle accroît également la complexité du traitement.



Approche de restauration

Comment traiter une usure modérée ?

Traitement orthodontique préalable suivi d'une restauration complète des arcades dentaires



Principe de Dahl



Restauration d'arcade dentaire uniquement



Technique de restauration

Comment traiter une usure modérée ?


Technique à main levée



Stamp technique



IMT

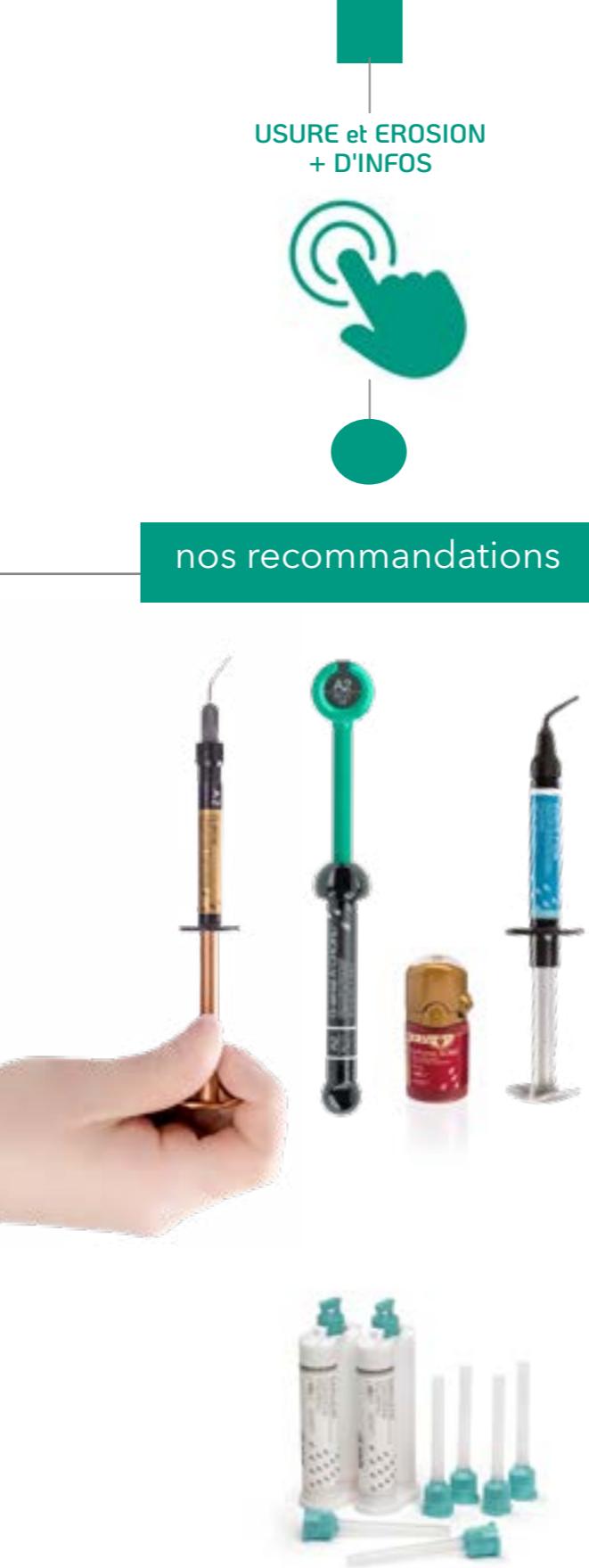

USURE et EROSION + D'INFOS



nos recommandations



Prévenir

Prévenir avant intervention et enrayer la progression de l'usure



Gouttière nocturne à recommander



Hygiène bucco-dentaire



nos recommandations



Re-polir les anciennes restaurations



Faire modifier les habitudes de consommation



ASTUCE

La mise en place d'une couche d'everX Flow assure une protection supplémentaire contre les fractures.

On estime à 39 % vos patients touchés par l'usure dentaire*.

*Azeez, A. A., Sherif, S., & França, R. (2021). Statistical estimation of wear in permanent teeth: a systematic review. Dentistry Review, 1(1), 100001.

**Zieliński, G., Pajak, A., & Wojcicki, M. (2024). Global prevalence of sleep bruxism and awake bruxism in pediatric and adult populations: a systematic review and meta-analysis. Journal of Clinical Medicine, 13(14), 4259.

PLUS D'INFOS ?



G-aenial™ A'CHORD

Composite premium universel avec un système de teinte simplifié



Boîte Unitips
15x0,16ml



Seringue de 2,1ml/4g

- Brillance longue durée, préservant plus longtemps l'esthétique de vos restaurations, que vous utilisez la technique stamp ou à main levée.
- La fluorescence naturelle garantit un résultat invisible sous n'importe quelle lumière.



Teintes	A1	A2	A3	A3.5	A4	A5	A6
Seringues	10006739	10006740	10006741	10006742	10006743	10006744	10006745
Unitips	10006753	10006754	10006755	10006756	10006757	10006758	10006759

Teintes	AO1	AO2	AO3	JE	AE	BW	BOW
Seringues	10006747	10006748	10006749	10006751	10006752	10006746	10006750
Unitips	10006761	10006762	10006763	10006765	10006766	10006760	10006764

nos recommandations

Dr R. Zunzarren, France



Technique main levée

Solution Idéale lorsque le patient a besoin d'un traitement simple et que la surface affectée est limitée. L'utilisation de G-aenial A'CHORD offre une excellente maniabilité, une esthétique irréprochable et une grande résistance à l'usure.

Prof. Marleen Peumans



Stamp Technique (ou technique tampon)

Parfaitement indiquée pour les traitements modérément complexes, lorsque de nombreuses dents sont touchées par l'usure. Cette technique est similaire à l'IMT, mais elle fait appel à un composite en pâte pour la reconstruction. L'utilisation du G-aenial A'CHORD avec la stamp technique confère à la restauration un brillant durable.

nos offres

PROMO composites

4+1* 10+3*

Les moins chères sont offertes. *gratuités envoyées par GCF

4 seringues ou boîtes d'unitips

le stand OFFERT* 70001748

*gratuités envoyées par GCF

sur seringues & unitips G-aenial A'CHORD, G-aenial A&P, essentia, everX Flow, teintes au choix

Kit Seringues	
Layering Kit, 5 seringues A2, A3, AO2, JE, AE	10006767
Core Kit, 5 seringues A1, A2, A3, A3.5, A4	10006768
Trial Kit A, 3 seringues 2xA2, 1xA3	10006769

Kit unitips	
Layering Kit, 75 unitips 15x (A2, A3, AO2, JE, AE)	10006772
Core Kit, 75 unitips 15x (A1, A2, A3, A3.5, A4)	10006773



PLUS D'INFOS ?



G-aenial™ Universal Injectable

Composite de
restauration
haute résistance

- Composite le plus résistant à l'usure du marché, idéal pour traiter les cas d'usure modérée
- Capacité d'auto-polissage pour un brillant durable et une usure réduite de l'antagoniste

Teintes	Unitips 15x0,16ml	Seringues 1 ml/1,7g
A1	10006896	10003705
A2	10006897	10003706
A3	10006898	10003707
A3.5	10006899	10003708
A4	10006900	10003709
B1	10006901	10003710
B2	10006902	10003711
CV	10006903	10003712
CVD	10006904	10003713
AO1	10006905	10003714
AO2	10006906	10003715
AO3	10006907	10003716
BW	10006911	10003704
XBW	10006910	10003703
AE	10006909	10003718
JE	10006908	10003717

10003735 les 30 embouts flexibles

SANS
BISPHENOL-A

nos recommandations



Technique de moulage par injection


Parfaitement indiquée pour les traitements plus complexes, lorsque de nombreuses dents sont touchées par l'usure. Cette technique est idéale pour transférer une morphologie très précise de la dent en bouche de manière rapide et prédictible. **G-aenial Universal Injectable**, est le choix privilégié pour obtenir les meilleurs résultats.



La recharge	Injection Moulding Kit
10001483	10003753
2x48ml + 6 embouts	1 cartouche EXACLEAR + 3 seringues A1, A2, A3 G-aenial Universal Injectable



L'embout le plus long pour le
chemin le plus court vers une
restauration parfaite

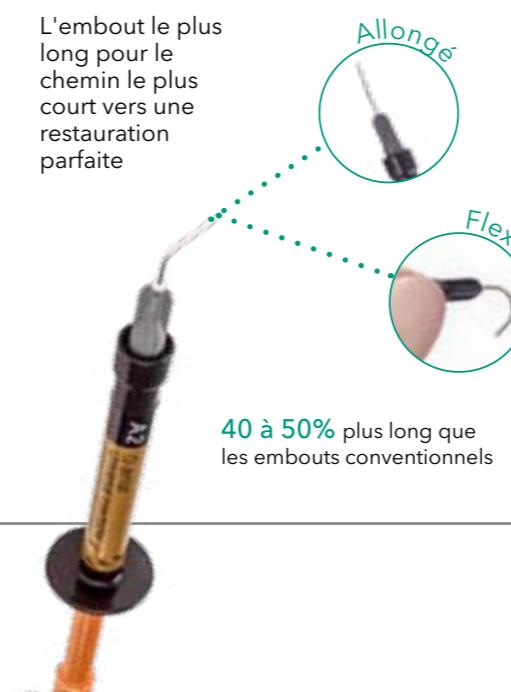40 à 50% plus long que
les embouts conventionnels

notre offre

**G-aenial Universal
Injectable**
8+2*


sur seringues & unitips, teintes au choix.
*Gratuités envoyées par GCF

COMMENT CHOISIR
L'ADHÉSIF IDÉAL ?

- Idéal pour soulager instantanément l'hypersensibilité causée par l'usure
- Simple, rapide et économique : 300 gouttes par flacon



Compatibility avec tous les composites GC et tous les modes de mordançage

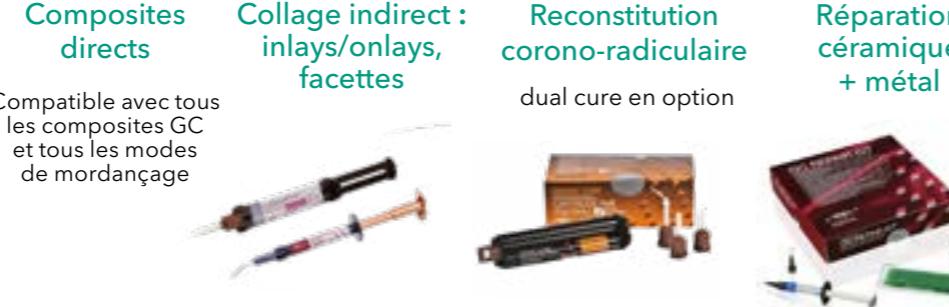

10001458 Le Tri Pack (3x5ml)
10001461 La recharge 5ml
10001242 Les unidoses 50 x0,1ml

notre offre

8 G-ænial Universal
Injectable
1 G-Premio BOND 5ml
OFFERT*

sur seringues & unitips, teintes au choix.
Gratuité envoyée par GCF (code 10001461)

G-Premio
BOND

l'adhésif
UNIVERSEL
MULTI-INDICATIONS



G2-BOND Universal, l'adhésion en 2 étapes...

La solution idéale pour la technique IDS

10006819 Le Pack

1 flacon de 5 ml & capuchon de 1-PRIMER + 1 flacon de 5 ml & capuchon de 2-BOND + 20 plateaux jetables + 50 pinceaux applicateurs + un guide technique

+ D'INFOS



- Renforcement des dents en cas de contraintes occlusales élevées
- Très haute résistance à la fracture pour inhiber les effets de chocs causés par le bruxisme



dent fragilisée



avec everX Flow, la fissure est stoppée

everX
Flow

Composite fluide
fibro-renforcé pour
substitut dentinaire

nouvelle application



Pas de recouvrement de la surface proximale !
car la teinte et la texture lisse sont conservées.

EIAziz RHA, EIAziz SAA, EIAziz PMA, Frater M, Vallittu PK, Lassila L, Garoushi S. Clinical evaluation of posterior flowable short fiber-reinforced composite restorations without proximal surface coverage. Odontology. 2024 Oct;112(4):1274-1283.



Teinte Bulk (translucide)
Profondeur de photopolymérisation 5.5mm
Optimale pour les profondes cavités postérieures & pour un placement rapide



Teinte Dentine
Profondeur de photopolymérisation 2.0mm
Optimale pour des résultats plus esthétiques & les reconstitutions de moignons



10001489 teinte Dentin, seringue de 2ml
10001488 teinte Bulk, seringue de 2ml



COMMENT CHOISIR
LE MATERIAU DE
RESTAURATION IDEAL ?



nos offres

D-Light DUO OFFERTE

22 seringues*

G-aenial A&P, G-aenial FloX,
G-aenial Universal Flo,
essentia, everX Flow
G-aenial A'CHORD (seringues ou unitips)

*panachage possible.
boîte d'unitips possibles pour le G-aenial A'CHORD

20 seringues*

G-aenial A&P, G-aenial FloX,
G-aenial Universal Flo,
essentia, everX Flow
G-aenial A'CHORD (seringues ou unitips)
+ 1 Tri Pack G-Premio BOND

*panachage possible.
boîtes d'unitips possibles pour le G-aenial A'CHORD



D-Light DUO

70000006

Gratuite envoyée par GCF



15 boîtes unitips*

G-aenial Anterior & Posterior

*teinte au choix. Boîte de 20 unitips
Gratuité envoyée par GCF

D-Light® Pro

Offres Volume disponibles avec la D-Light Pro OFFERTE

contactez votre responsable régional

Kit D-Light Pro - 70000008

Pièce à main & module électronique, embout lumineux 8 mm, pack de batterie (x2), station de charge, chargeur, adaptateur EU/UK, 1 champ dur de protection des yeux, et 3 champs souples



L'Art de créer des restaurations invisibles

G-aenial® Anterior



G-aenial® Posterior



G-aenial® Flo X G-aenial® Universal Flo



e s s e n t i a l



Essentia Universal



10003549 essentia U, unitips 15x0,16ml
10003524 essentia U, seringue 2ml (4g)
10003383 HiFlo U, seringue 2ml (3,6g)
10003385 LoFlo U, seringue 2ml (3,4g)



Les solutions esthétiques GC pour chaque cas...avec la manipulation que vous préférez

nos offres

PROMO composites

4+1* 10+3*

Les moins chères sont offertes. *gratuités envoyées par GCF



4 seringues ou boîtes d'unitips

le stand OFFERT* 70001748

*gratuités envoyées par GCF

FLUIDITÉ DES COMPOSITES



PLUS D'INFOS ?



Tolérant à
l'humidité



Rapide



Facile



Scientifiquement
prouvé



Economique



Placement en bloc
En capsule directement
dans la cavité



Mise en forme
Temps de travail prolongé. Non collant, facile à contourner



Finition
Début de la finition après 2'30"



Application de EQUIA Coat
Surface brillante sans polissage
Scellement marginal et résistance
à l'usure



Photopolymérisation
Restauration terminée
en seulement 3'25"



EQUIA Forte™ HT

La solution tolérante
biocompatible
et esthétique

Application en Vidéo



Intro Pack (20 capsules HT + 20 unidoses)
Boîte de 50 capsules A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4
Promo Pack (2x50 caps HT + EQUIA Forte Coat 4ml)
Clinic Pack (250 caps HT + EQUIA Forte Coat 6ml)

RESTAURATION



SCELLEMENT



RESTAURATION

Fuji II LC



L'option rapide
photopolymérisable

A1, A2, A3, A3.5, A4 B2, B3,
B4, C2, C4, D2, Assorti

Fuji IX GP/Fast



La référence éprouvée pour
les cavités postérieures

A2, A3, A3.5, B2, B3
Fast en A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C4

Fuji TRIAGE



La solution sillon, prévention
et coiffage pulpaire indirect

10000389 Rose
10000390 Blanc

SCELLEMENT

Fuji I



Le CVI pur

10000091

Fuji PLUS



la référence CVIMAR

10000087 jaune
10000161 A3



SilverMix
70000070

Applier IV
70000004

Les verres ionomères de GC : une longue tradition d'innovation et de qualité

Avec leur large éventail d'indications, les restaurations verres ionomères constituent une partie importante
de l'arsenal de chaque dentiste

nos offres

Fuji II LC / Fuji I

4+1*

*sur boîtes CVI de 50 caps, teintes au choix - panachage possible.
Gratuité envoyée par GCF la moins chère est offerte



3 boîtes

Applier IV OFFERT*

8 boîtes

Silvermix OFFERT*

PLUS D'INFOS ?



Priorité à l'esthétique et au naturel



TUTOS MAQUILLAGE

Dr J. Tapia



- Disilicate de lithium avec technologie HDM pour des propriétés physiques inégalées
- Limites lisses et polissabilité supérieure grâce à la structure homogène
- Glaçage et maquillage avec [Initial IQ Lustre Paste ONE](#) et [Initial Spectrum Stains](#)

SOLUTIONS ZIRCONE



initial™ Zirconia Disk Multilayer Elite

Disque hybride dernière génération...

La zircone est parfaitement indiquée, surtout en cas de marge sous-gingivale.

3+1*

Initial Zirconia Disk Multilayer Elite. Au choix.
*Gratuité en A2 ou A3 envoyée par GCF.
Le moins cher est offert.



existe en 16 teintes et 4 épaisseurs - ø 98,5 mm

Initial LiSi Block

Bloc Disilicate de lithium déjà cristallisé avec des propriétés physiques optimales sans cuisson

Initial LiSi Block CEREC	
	Taille 14
A1 HT	10004844
A2 HT	10004956
A3 HT	10004957
A3.5 HT	10037273
B1 HT	10004886
A1 LT	10004887
A2 LT	10004958
A3 LT	10004888
A3.5 LT	10037274
B1 LT	10004889
BL	10037275



Initial LRF Universal	
	Taille 14
A1 HT	10003078
A2 HT	10003084
A3 HT	10003090
A3.5 HT	10003096
B1 HT	10003102
A1 LT	10003081
A2 LT	10003087
A3 LT	10003093
A3.5 LT	10003099
B1 LT	10003105
BL	10003108



Initial LRF for CEREC			
	Taille 12	Taille 14	Taille 14L
A1 HT	10003044	10003045	10003046
A2 HT	10003050	10003051	10003052
A3 HT	10003056	10003057	10003058
A3.5 HT	10003062	10003063	10003064
B1 HT	10003068	10003069	10003070
A1 LT	10003047	10003048	10003049
A2 LT	10003053	10003054	10003055
A3 LT	10003059	10003060	10003061
A3.5 LT	10003065	10003066	10003067
B1 LT	10003071	10003072	10003073
BL	10003074	10003075	10003076

Barrettes de 5 blocs. Les moins chères sont offertes. *Gratuités envoyées par GCF



Taille 12 : inlays, onlays, overlays
Taille 14 : adaptée aux couronnes individuelles
Taille 14L : adaptée aux larges restaurations



CERASMART270 for CEREC

	Taille 12	Taille 14	Taille 14L
A1 HT	10001391	10001413	10001435
A2 HT	10001392	10001414	10001436
A3 HT	10001393	10001415	10001437
A3.5 HT	10001394	10001416	10001438
B1 HT	10001395	10001417	10001439
A1 LT	10001396	10001418	10001440
A2 LT	10001397	10001419	10001441
A3 LT	10001398	10001420	10001442
A3.5 LT	10001399	10001421	10001443
B1 LT	10001400	10001422	10001444
BL	10001401	10001423	10001445

CERASMART270 Universal

	Taille 14
A1 HT	10001424
A2 HT	10001425
A3 HT	10001426
A3.5 HT	10001427
B1 HT	10001428
A1 LT	10001429
A2 LT	10001430
A3 LT	10001431
A3.5 LT	10001432
B1 LT	10001433
BL	10001434

nos offres

CERASMART270

4+1* 10+3*



PLUS D'INFOS ?



QUAND COLLER ?



G-CEM ONE™

La colle simplifiée
avec nettoyant
booster AEP pour
les cas encore plus
exigeants

notre offre

G-CEM ONE
recharges A2, AO3, Tr, WO

3+1*

*panachage possible, la moins chère est offerte
Gratuité envoyée par GCF

G-CEM LinkForce™, la colle à prise duale

Seringue G-CEM LinkForce 8,7g/5ml



10001341 A2
10001342 Tr
10001343 Opaque
10001344 Bleach



10006920	System Kit : 2 seringues 4,6g (A2+Tr), 1 AEP 4mL, 1 Multi Primer 4mL +15 embouts Automix Regular + 5 Endo
10006918 A2 10006919 Tr	Starter Kit : 1 seringue G-CEM ONE (4,6g), 1 G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer 2mL, 8 embouts Automix Regular + 2 Endo
10006921 A2 10006922 Tr	Twin Pack (2 seringues, 15 embouts regular + 5 endo)
10006923 AO3 10006924 WO	Single Pack (1 seringue 8 embouts regular + 2 endo)
10006925 A2 10006926 Tr	Value Refill (8 seringues, 60 embouts regular + 20 endo)
10006833	G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer 4ml

QUAND SCELLER ?



FujiCEM Evolve

CVIMAR pour tous les cas rétentifs



10004926	Single Pack (1 seringue + 15 embouts regular)
10004916	Triple Pack Handmix (3 seringues + 1 bloc)
10004928	Triple Pack Automix (3 seringues + 45 embouts)
10006621	Clinic Pack (8 seringues + 2 blocs)

10004929
10004917 Embouts Endo
Embouts Regular x15



FujiCEM®2SL

la solution traditionnelle



10003459 les 2 cartouches (13,3g-7,2ml)
10003465 Embouts Endo x10
10003464 Embouts Regular x20
10003470 Embouts Regular x100

Fuji I



10000091

Fuji PLUS



10000087 jaune
10000161 A3



GUIDE D'ASSEMBLAGE



nos offres

FujiCEM Evolve Clinic Pack

4 boites Push & Click Tip regular
OFFERTES* 10004917



*Gratuité envoyée par GCF

FujiCEM Evolve Single Pack

3+1* 10004926

8 boites

Silvermix OFFERT*

sur boites CVI de 50 caps, teinte au choix - panachage possible.

3 boites

Applier IV OFFERT*

Fuji II LC / Fuji I

4+1*

Panachage possible. Teinte au choix
*Gratuité envoyée par GCF. La moins chère est offerte

PLUS D'INFOS ?



HBLD 009

Application d'un topique
- GC Tooth Mousse -
pour hypersensibilité
dentinaire



TOOTH MOUSSE MI PASTE PLUS™

Crèmes dentaires
topiques à base
aqueuse sans sucre
contenant du
Recaldent™ CPP-ACP

notre offre

5+1 sur 10003210 & 10003271

10003210 Tooth Mousse - 10003271 MI Paste Plus

Pour toute commande, contactez votre responsable régional GC, votre distributeur ou RDV sur le site www.tooth-mousse.fr

Tous les soirs, à domicile, après le brossage des dents



Pressez une quantité de GC
Tooth Mousse™ ou
MI Paste Plus™ de la taille
d'un petit pois
sur un doigt propre
ou un coton-tige.

Appliquez sur toutes
les dents et utilisez
votre langue pour
répartir la crème
uniformément.

Laissez agir GC Tooth
Mousse™ ou MI Paste
Plus™ sur les dents
pendant au moins 3
minutes, en évitant de
cracher ou d'avaler.
Plus le produit reste
longtemps dans la
bouche, meilleurs sont
les résultats.

Recrachez l'excédent ou
laissez les résidus de
GC Tooth Mousse™ ou
MI Paste Plus™ se dissiper
progressivement.
Évitez de rincer et ne
mangez ni ne buvez
pendant 30 minutes
après l'application.

Tooth Mousse	Parfum	MI Paste PLUS
10001743	Assorti	10001749
10001744	Vanille	10001753
10001745	Fraise	10001751
10001746	Melon	10001752
10001747	Menthe	10001750
10001748	Tutti Frutti	10001754

Pack de 10 tubes de 40g/35ml



Tri Plaque ID Gel®

identifie en 3 couleurs
la plaque récente, mature
et la production acide du biofilm



10000867 Le tube de 40g

Saliva Check Buffer

Identifie la capacité de défense
naturelle de la salive



GUIDE COMPLET

Dentisterie MI et
plans de traitement



22 600 ppm de fluor
avec la molécule



MI Varnish®

renforce et protège l'émail
d'un simple coup de pinceau

10003390 Fraise x35
10003392 Fraise x100

10003391 Menthe x35
10003393 Menthe x100



Unidoses de 0,40ml

HBLD045
depuis le 1^{er} février 2025

Application sur 2 arcades,
2 séances/an,
de 1 à 25 ans
sous condition
d'un risque
carieux individuel
élevé (RCI)

Tous les 6 mois au cabinet



Retirez l'aluminium de la dose
unitaire de MI Varnish.



Appliquez une fine couche
uniforme sur les dents/surfaces
à l'aide d'un pinceau jetable.

Évitez de manger ou de boire
pendant les 4 heures
suivant l'application.

Dr Rouas, France

notre offre

2 recharges MI Varnish

recharge x35 ou x100

l'Intro Kit OFFERT*

10003389 5 unidoses menthe + 5 fraise
*gratuité envoyée par GCF

Préparation

REVOKEK LC




Idéal pour vérifier plusieurs fois l'occlusion

10000246 La boîte
Stick B2 + accessoires



GC Composite Modeling Kit

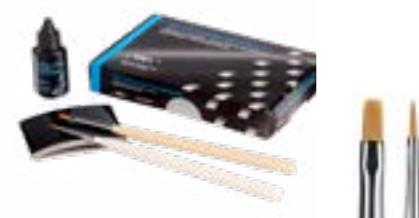

10003387 Le Kit : flacon 6ml + 10 pinceaux (5 ronds & 5 plats), 2 supports + bloc de mélange
10000241 Pinceaux plats x10
10000240 Pinceaux ronds x10



TEMPSMART™ DC



Cartouche 48ml (60g) + 16 embouts en A1, A2, A3, A3.5, B2, BW
Seringue 10ml (12,5g) + 10 embouts en A1, A2, A3, B2

EXABITE II NDS



Silicone-A pour enregistrement de l'occlusion

10003197 2 cartouche 48ml (83g) + 12 embouts de mélange

New Metal Strips



Strips de finition et de polissage
10000096 Assortiment, 12 pièces

Fit CHECKER Advanced



VPES pour vérification de l'ajustage
10001026 Pack 1-1 Blanc (2x62g + accessoires)
10001027 Pack 1-1 Bleu (2x56g + accessoires)

everStick PERIO



Pour tous types d'attelles

10003407 everStick PERIO
la boîte 2 x12cm

GC CAVITON



Matériau d'obturation provisoire

10000101 Pot 30g, blanc

3+1*

Fuji TEMP LT™



CVI pour scellement provisoire longue durée

10000856 la recharge
2 cartouches de 13,3g/7,2ml

70000002 GC Paste Pak Dispenser

Restez connectés à l'actualité GC

inscrivez-vous



GET CONNECTED SMILE PROGRAM

Apprendre. Partager. Gagner.



Get the app

RÉSERVEZ UNE SESSION GRATUITE



LUNCH & LEARN

L'apprentissage gratuit et sur mesure directement sur votre lieu de travail...

Une séance de formation durant l'heure du déjeuner sur une thématique définie en amont.

L'occasion pour les participants d'acquérir de nouvelles compétences, renforcer des connaissances et manipuler les produits, dans une ambiance conviviale et sur place

Découvrez GC France Expertise,
une plate forme dédiée au savoir-faire et à la technicité de GC France

Notre ambition

vous offrir un accès centralisé simple et direct à un ensemble de ressources pensées pour votre activité

Notre objectif

mettre en lumière le savoir-faire spécifique de GC France, notre engagement à vous accompagner, à vous former et à vous fournir les solutions les plus adaptées à votre pratique quotidienne.



New Metal Strips: strips recouverts de particules d'oxyde d'aluminium pour le contournage, la finition et le polissage des restaurations composites, verre ionomère ou métalliques.
REVOTEK LC : résine composite monocomposant photopolymérisable pour couronnes, bridges, inlays et onlays provisoires avant la mise en place d'un traitement permanent.

Fit checker Advanced : matériaux en polyéther de vinyle pour le contrôle des points de pression et la précision d'ajustage des travaux protthétiques.

EXABITE II NDS : Matériau silicone-A aux propriétés spécialement adaptées aux exigences de la prise d'occlusion

Caviton : Matériau d'obturation temporaire qui durcit au contact de l'humidité telle que la salive

everStick PERIO : fibre de verre renforcée pour contention parodontale

TEMPSMART DC : matériau provisoire à prise dure pour C&B

Fuji TEMP LT : CVI pâte/pâte pour scellement provisoire

Ensemble, cultivons



Vous souhaitez passer une commande* ?

Contactez votre responsable régional, il se chargera de tout !

Vous bénéficieriez de vos conditions habituelles négociées avec votre distributeur, et les gratuités vous parviendront directement de chez GC !



*au préalable, identifiez le distributeur avec lequel vous travaillez, et préparez votre numéro client.

COMPOSITES/ADHESIF	OFFRES		gratuité	code
	p7	G-aenial Universal Injectble	8+2	
	p8	G-aenial Universal Injectble	1 recharge G-Premio BOND	10001451
	p5&11	PROMO Composites (seringues ou unitips)	4+1 et 10+3	
	p10	Composite : 4 seringues ou boites d'unitips	Stand	70001748
	p10	22 seringues de composite	D-LIGHT DUO	10000006
	p10	15 boites unitips (x20) G-aenial A&P	D-LIGHT DUO	10000006
	p10	20 seringues de composite + Tri Pack G-Premio BOND	D-LIGHT DUO	10000006
	p10	Kit D-Light Pro		70000008
CVI	p13	Fuji II LC / Fuji I	4+1	
	p13	8 boites de CVI	1 Silvermix	70000070
	p13	3 boites de CVI	1 Applier IV	70000004
Assemblage	p16	G-CEM ONE recharges	3+1	
	p17	FujiCEM Evolve Clinic Pack	4 Push & Click Tip	10004917
	p17	FujiCEM Evolve Single Pack	3+1	10004926
MI	p18	GC Tooth Mousse	5+1	10003210
	p18	GC MI Paste Plus	5+1	10003271
	p19	2 MI Varnish (x35 ou x100)	Intro Kit MI Varnish	10003389
CAD CAM	p20	GC CAVITON	3+1	10000101
	p15	CERASMART270	4+1 et 10+3	
	p15	Initial Zirconia Disk Elite	3+1	

Classe IIa
EXACLEAR : silicone innovant et transparent qui répond aux besoins des cas esthétiques exigeants
GRADIA CORE : composite de reconstitution corono-radiculaire esthétique et scellement des tenons

Fuji II LC : VI de restauration photopolymérisable pour les cavités de classe III et IV et multi usages
EQUA Forte HT : restauration permanente pour toutes les cavités de classe I et II, restaurations cervicales et faux moignons

FujiCEM 2 SL/FujiCEM Evolve : scellement d'inlays, onlays, C&B à base de métal, de résine et tout céramique haute résistance, tenons fibres de verre, céramique et métallique

G-CEM ONE : ciment résine auto-adhésif pour une adhésion à la dent et tous autres substrats et surfaces émail, dentine, zircone, métal, céramiques vitreuses, matériaux hybrides

G-CEM LinkForce : Colle composite à prise dure pour toutes les indications, tous les substrats

Initial LRF : céramique feldspathique renforcée en leucite pour restaurations indirectes tout céramique

CERASMART270 : restaurations indirectes sans métal (couronne complète, inlay, onlay, facette lamée) & couronne sur implant.

Initial LiSi Block : Bloc CAD/CAM en céramique vitreuse à base de disilicate de lithium pour facettes, couronne, inlays, onlays, couronnes partielles, couronne sur implant.

G-aenial Flo X : composite fluide radioopaque pour liner, bloquer les contre-dépouilles, préparation tunnel ou restauration des petits défauts

G-aenial A'CHORD : composite de restauration universel pour toutes classes de cavités

G-aenial Universal Flo : composite fluide pour toutes classes de cavité, barre de contention et intervention à minima

G-aenial A & P : composites de restauration Antérieur et Postérieur pour toutes classes

G-aenial Universal Injectble : composite de restauration pour toutes classes de cavités

G-Premio BOND : adhésif monocomposant universel photopolymérisable

Essentia: composite de restauration universel radioopaque.

everX Flow : composite fibre renforcé pour remplacement dentinaire.

FUJI TRIAGE : matériau verre ionomère radioopaque de protection de surface.

Gamme CVI : ciment de scellement ou de restauration

G2-BOND Universal : adhésif universel

MI Varnish : vernis de protection de l'émail.

Initial Zirconia Disk Multilayer Elite : restaurations complètes (bridges) et unitaires

Classe I
D-Light Pro : lampe à photopolymériser LED à double longueurs d'onde

Tooth Mousse, MI Paste PLUS : crèmes dentaires topiques sans sucre à base aqueuse.

Dry Mouth Gel : un gel qui apporte confort et soulagement aux bouches sèches.

Classification : outil pédagogique

Tri Plaque ID Gel : test d'évaluation du risque carieux

Saliva Check BUFFER : test d'évaluation de la qualité de la salive

Dispositifs médicaux pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé, non remboursés par la sécurité sociale. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. Organisme certificateur n°2797.

Distribués par GC France - Offres réservées à la France métropolitaine.

Divers		Prix ttc indicatifs	
p20	REVOtek LC	10000246	99 ^{€ttc}
	EXABITE II NDS	10003197	99 ^{€ttc}
	NEW METAL STRIPS	10000096	129 ^{€ttc}
	FUJI TEMP LT	10000856	209 ^{€ttc}
	PASTE PAK Dispenser	70000002	145 ^{€ttc}
	GC CAVITON	10000101	27 ^{€ttc}
	everStick PERIO	10003407	309 ^{€ttc}

GC Initial Zirconia Disk Multilayer Elite - Ø 98,5mm
14mm 16mm 20mm 25mm

A1	70017398	70017417	70017436	70017455
A2	70017399	70017418	70017437	70017456
A3	70017400	70017419	70017438	70017457
A3.5	70017401	70017420	70017439	70017458
A4	70017402	70017421	70017440	70017459
B1	70017403	70017422	70017441	70017460
B2	70017404	70017423	70017442	70017461
B3	70017405	70017424	70017443	70017462
B4	70017406	70017425	70017444	70017463
C1	70017407	70017426	70017445	70017464
C2	70017408	70017427	70017446	70017465
C3	70017409	70017428	70017447	70017466
C4	70017410	70017429	70017448	70017467
D2	70017411	70017430	70017449	70017468
D3	70017412	70017431	70017450	70017469
D4	70017413	70017432	70017451	70017470
OM1	70017414	70017433	70017452	70017471
OM2	70017415	70017434	70017453	70017472
OM3	70017416	70017435	70017454	70017473

214^{€ttc} 238^{€ttc} 286^{€ttc} 333^{€ttc}

La restauration composite		Prix ttc indicatifs	Les CVI / Concept MI		Prix ttc indicatifs
Gamme G-aenial					
La seringue Anterior , Inside, Outside - 2,7ml/4,7g					
10000823 XBW 10000803 BW 10000804 A1 10000805 A2					
10000806 A3 10000807 A3.5 10000808 A4 10000824 B1					
10000809 B2 10000810 B3 10000811 C3 10000812 CV					
10000813 CVD 10000814 AO2 10000815 AO3 10000816 AO4					
10000817 JE 10000818 AE 10000819 TE 10000820 IE					
10000821 SE 10000822 CVE					
La seringue Posterior , Outside - 2,7ml/5,5g					
10000825 PA1 10000826 PA2 10000827 PA3					
10000828 PA3.5 10000829 PJE					
20 Unitips Anterior - 0,16 ml/0,28g soit 3,2ml/5,6g					
10000775 A1 10000776 A2 10000777 A3 10000778 A3.5					
10000782 IE 10000780 CV 10000779 AO3 10000781 AE					
La seringue Flo X - 2ml/3,6g					
10003361 A1 10003362 A2 10003363 A3 10003364 A3.5					
10003365 A4 10003366 CV 10003367 AO2 10003368 AO3					
La seringue Universal Flo - 2ml/3,4g					
10000849 BW 10000850 A1 10000851 A2 10000840 A3					
10000841 A3.5 10000842 A4 10000843 B1 10000844 B2					
10000845 B3 10000846 C3 10000850 CV 10000847 AO2					
10000848 AO3 10000851 JE 10000852 AE					
G-aenial Universal Injecttable , la seringue - 1ml/1,7g					
la boite de 15 unitips x 0,16ml					
10003735 les 30 embouts flexibles					
G-aenial A'CHORD , la seringue - 2,1ml/4g					
Layering Kit 10006767 A2 A3 A2 AE JE					
Core Kit 10006768 A1 A2 A3 A3.5 A4					
la boite de 15 Unitips - 0,16 ml					



<https://fr-fr.facebook.com/GcFrance>



gcfrancecorebusiness



<https://fr.linkedin.com/company/gc-france>



https://www.tiktok.com/@gcfrance_2025



Ignace Obli
06 13 08 02 60
ignace.obli@gc.dental



Alexandre Carlier
06 80 93 54 70
alexandre.carlier@gc.dental



Virginie Dubuis
06 09 58 00 22
virginie.dubuis@gc.dental



Léa Ferrand
06 37 16 75 71
lea.ferrand@gc.dental



Antoine Harel
06 26 99 19 57
antoine.harel@gc.dental



Mickaël Listo-Angelier
06 26 87 11 80
mickael.listo-angelier@gc.dental



David Demeneix
07 85 75 42 63
david.demeneix@gc.dental



Patricia Dauphouy
06 43 81 42 50
patricia.dauphouy@gc.dental



Laurent Blanc
06 46 79 47 38
laurent.blanc@gc.dental



Gabriel Bourdeaud'hui
06 34 17 37 79
gabriel.bourdeaudhui@gc.dental



Camille Sempé
06 80 51 29 47
camille.sempe@gc.dental



Elodie Cantuel
06 07 97 12 70
elodie.cantuel@gc.dental



Responsable relation
professionnelle et scientifique
Ludovic Moreau
06 85 30 37 04
ludovic.moreau@gc.dental



Responsable marketing
& communication
Candice Cothenet
06 12 45 96 16
candice.cothenet@gc.dental



Responsable groupe cabinet
& grands comptes
Nicolas Pichavant
06 88 82 14 86
nicolas.pichavant@gc.dental

,'GC,'